


Aplikátor Kuzněcova No56

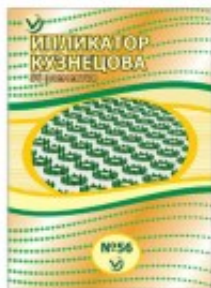

Aplikátor Kuzněcova 19 x 35 cm je jednoduchou, avšak velmi důmyslně zkonstruovanou, zdravotní pomůckou, velmi účinnou proti nesčetnému množství bolestí a neduhů.

Ціна з адміністрацыйнага ўраўнявання: 220,00 Kč

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 220,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Вýrobce: [TML a.s.](#)

Aplikátor Kuzněcova 19 x 35 cm je jednoduchou, avšak velmi důmyslně zkonstruovanou, zdravotní pomůckou, velmi účinnou proti nesčetnému množství bolestí a neduhů. Aplikátor doporučujeme všem jako účinný prostředek pro léčbu, prevence a relaxace. Je to nejjednodušší způsob odstraňování spouštěvých bodů a zón (trigger points).

Používejte už při prvních známkách únavy svalů nebo zad !

Výhody aplikátoru Kuzněcova:

- Okamžitý efekt, jednoduchost používání, možnost neomezeného používání dle potřeby. Aplikátor je vhodný pro odbornou i laickou veřejnost, jak k léčbě tak i k prevenci onemocnění.

Použití aplikátoru Kuzněcova:

- Pro povzbuzení, tonizaci, energetizaci, při těžkém ranním vstávání:

krátkodobé (1 - 5 minut) ležení na aplikátoru;

- Pro uvolnění, zklidnění, při únavě, nervozitě a nespavosti - před spaním:

použití delší než 10 minut (lze na něm i usnout);

- Pro odstraňování spouštěvých bodů (trigger points), stuhlosti svalů:

použití 15 až 40 minut;

- Pro rychlou úlevu od bolesti a pro léčbu:

používejte kombinaci ležení na aplikátoru (celou plochou zad) a několikanásobné přitlačování aplikátoru na místo projekce bolesti po dobu 30-45 vteřin, s pauzou cca 15 vteřin. Opakujte dokud bolest nezmizí.

Normalizace činnosti kardiovaskulárního systému, dýchací a nervové soustavy, trávicího traktu atd.: Doporučujeme používat aplikátor dlouhodobě a to v oblasti trupu (hrud, záda, břicho), a to tak, že jej dobře přiložíme.

Obnova pracovního výkonu: Je potřeba přikládat aplikátor nejlépe na celé tělo, včetně končetin.

Délka aplikací a jejich četnost není omezena.

Proč aplikátor Kuzněcova funguje

- Působení aplikátoru na celý organismus je založené na principu zpětné biologické vazby - přes kůži, svaly, cévy, nervová zakončení, míchu, mozek a zpět. Aplikace výrazně zlepšuje adaptační a seberegulační schopnosti organismu, stimuluje jeho obranné síly.

- Místní působení se vysvětluje zlepšením prokrvení tkání, a tímto přísunem kyslíku a živin. Zlepšením toku lymfy dochází k rychlejšímu odplavování toxinů a nežádoucích látek.

- Místní použití aplikátoru několikanásobně zvyšuje účinnost mastí, balzámů apod. léčivých prostředků. Ty nanášejte na postižené místo ihned po aplikaci. Doporučujeme krém-balzám Šungit

Upozornění: Ostrá píchavá bolest od jehliček aplikátoru se pociťuje jen zlomek minuty. Vydržte chvilku ! Bolest a ztuhlost svalů ustoupí a následuje příjemný pocit uvolnění a teplacelková a místní jako u masáží. Při epilepsii, chronických kožních chorobách, v těhotenství poraďte se s lékařem.

Aplikátor je schválen certifikátem ES, je vyráběn v souladu se směrnicí 2002/95/ES. Plastové dotykové body jsou z netoxického materiálu; použitý textil je 100% bavlna.

Poznámka: Uvolněné kroužky je nutné přilepit nebo přišít na původní místo!